


自動連續操作真空烘箱 Vacuum Drying Ovens DP610P



控制面板



操作範例

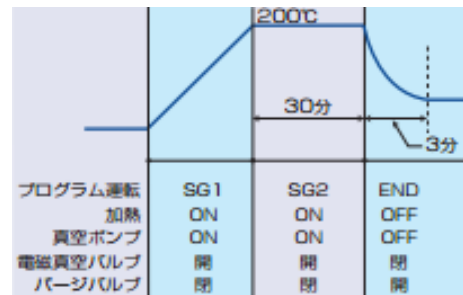

特點

- <溫度程序控制> + <真空幫浦 ON/OFF> + <Purge 閥 ON/OFF>
- 程式運轉時，溫度程式控制，真空幫浦開關與洩壓閥開關連動，自動順序運轉。
- 裝置逆流防止閥，停電或操作錯誤時，可維持真空烘箱內部真空度，真空幫浦油不會逆流至真空烘箱內部
- 設有自動/手動切換開關，緊急時可切換至手動操作
- 真空幫浦收納於烘箱內部，高品質控制器，獨立過昇防止器，操作方便，安全性高

機型	DP610P
方式	減壓*壁面加熱
操作溫度範圍	40°C~200 °C
操作壓力範圍	101 to 0.1 kPa (760 to 1 Torr)
最高溫度到達時間	約 120 分
溫度調節精度	±1°C (at 200°C) JIM K05
溫度變動	±1.5°C (at 200°C) JIS C60068
組成部分	
加熱器	3.15 KW
加熱方式	壓力槽直接加熱
溫度控制器	PID 控制
真空計	低音管式 0 - 0.1MPa
觀測窗	強化玻璃加安全保護膜
操作功能	定值運行、自動開始、自動停止、程序運行(最多 99 步驟)
其他功能	時間表式功能 (電源關掉時也能顯示)
感應器	K 熱電偶
安全裝置	對溫度感應器異常/加熱器斷線/加熱器短路/自動過熱防止進行自我診斷。控制鍵鎖定/漏電保險裝置/獨立過溫防止器
規格	
內部尺寸	W600 x D600 x H600 mm
外部尺寸	W820 x D819 x H1650 mm
內容積	216 L
排氣/吸氣口	NW25 / Rc1/4 介面
電源	單相 · AC200 V · 50/60HZ · 17A
重量	310Kg

※1.條件為溫濕度 23±5 · 65%RH±20% (無負荷)

※2.不包含外部突出部分

※3.不含電源插頭

總代理：科協儀器股份有限公司

台北總公司 TEL: 02-23934248 台中營業所 TEL: 04-23712631

台南營業所 TEL: 06-2609022 高雄營業所 TEL: 07-2412050